


## PAKENDIS SISALDUD KASUTUSJUHEND K1013-01



**1.** Peske enne kasutamist käed. Tervishoiutöötaja peab proovi võtmisel kandma kindaid.

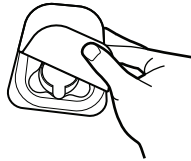


**2.** Eemaldage seade ümbrisest.



**3.** Keerake kork seadmega ühilduvalt katsutilt pealt.



**4.** Suruge katsuti tihedalt seadme külge nii, et täituvust indikeerivad jooned jääksid välisküljele.

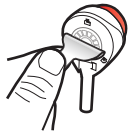


**5.** Eemaldage kile, tõmmates seda unasest nupust teisele poole.



**6.** Eemaldage läbipaistev kaitse punaselt nupult.



**7.** Valmistage õlg ette. Kinnitage seade puhtale õlale ja vajutage nuppu, et alustada vere kogumist.

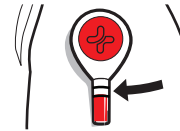

**8.** Laske seadmel 5 minutit verd koguda. Eemaldage seade enne aja täitumist juhul, kui veri on jõudnud ülemise täituvust indikeeriva jooneni.



**9.** Eemaldage seade seda ühele küljele tõmmates.



**10.** Eemaldage katsuti seadmest seda kergelt keerates ja allapoole tõmmates.



**11.** Vajutage kork katsutile täielikult peale. Segage tootja märgistuse kohaselt.

**Abi saamiseks  
pöörduge:  
+1 800 257 2370**

### TÕLGITUD KASUTUSJUHENDID

- The Tasso+ instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von Tasso+ finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de Tasso+ y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di Tasso+ sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du Tasso+ et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:
- Instruktionerna för användning och översättningar tillhörande Tasso+ finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- Tasso+-brugsanvisningen og -oversættelser findes på Tasso-nettstedet:
- Tasso+ -käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:
- Tasso+ kasutusjuhend ja tõlked on leitavad Tasso veebilehel:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-ifu>

### KASUTUSOTSTARVE

Võimaldab eneselt kapillaarvereproovi võtmist koos ühilduva proovi kogumiseks mõeldud katsutiga.

### PAKENDI SISU

Iga karp sisaldab ühte Tasso+ seadet.

### KÕRVALDAMINE

Järgige kohalikke juhendmaterjale juba kasutatud või defektsete teravate ja torkivate nakkusohutlike jäätmete käitlemiseks.

### VAJALIKUD MATERJALID (ei kuulu komplekti)

- Ühilduv katsuti, vaadake tootja märgistusi
- Kindad (tervishoiutöötajale)













- Alkoholiga vatitups
- Plaaster
- Soojendav padi või muu meetod käsivarre soojendamiseks

### ETTEVAATUSABINÕUD

- Ainult retsepti alusel saadav toode.
- Seade on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
- Mitte uuesti steriliseerida.
- Mitte kasutada, kui pakend on kahjustada saanud.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Protseduuri teostamise ajal võib hiljem esineda väikeseid haavandeid või muid jälgi.
- Mitte kasutada peale kehtivusaja möödumist.
- Mõeldud enesetestimiseks või tervishoiuteenuse osutaja poolt kasutamiseks.
- Kasutada istudes, sest igasuguse vereprotseduuriga võib kaasneda minestamine.
- Mitte kasutada imikute kandadel.
- Kasutajad peavad valideerima toote kasutamise spetsiifiliseks analüüsiks.
- Ainult väliseks kasutamiseks.

*Iga tõsine ohujuhtum, mis on esinenud seoses seadmega, tuleb raporteerida tootjale, volitatud esindajale ja pädevale ELi liikmesriigi asutusele, kus kasutaja ja/või patsient paikneb.*
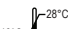
### SÜMBOLID

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  REF | Viitenumber                                     |  i         | Kasutamiseks tutvuda juhistega                  |
|  LOT | Partii kood                                     |            | See seade sisaldab teravaid osi                 |
|      | Tarvitamise lõpptähtpäev                        |            | Mitte kasutada, kui pakend on kahjustada saanud |
|      | Mitte uuesti kasutada                           |  Rx ONLY   | Ainult retseptiga saadav toode                  |
|      | Hoiustada temperatuuril 18 – 28 °C              |  STERILE R | Steriliseeritud kiiritamise teel                |
|      | Suhteline õhuniiskus transportimisel: 25 – 85 % |            | Mitte uuesti steriliseerida                     |