

## PAKNINGSVEDLEGG MED BRUKSANVISNING



**1.** Vask hendene før bruk. Helsepersonell må bruke hansker under blodprøven.



**2.** Ta ut enheten fra esken.



**3.** Skru av hetten fra det kompatible røret.



**4.** Med påfyllingslinjene vendt ut, trykk røret inn i enheten til det sitter tett.




**5.** Trekk fliken vekk fra den røde knappen.



**6.** Fjern det gjennomsiktige dekselet fra den røde knappen.



**7.** Forbered skulderen. Fest enheten til ren skulder og trykk på knappen for å starte prøvetakingen.

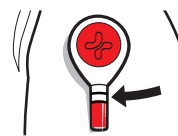


**8.** La røret fylles i 5 minutter. Fjern enheten hvis blodet når den øverste fyllingslinjen før tiden er ute.



**9.** Fjern enheten ved å skrelle den vekk fra den ene siden.



**10.** Fjern røret fra knappen med en liten vri og trekk ned.

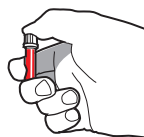

**11.** Trykk hetten helt på røret. Bland i henhold til produsentens merking.

**Kontakt oss  
for hjelp:  
+1 800-257-2370**

### OVERSATTE INSTRUKSJONER

- The Tasso+ instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von Tasso+ finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de Tasso+ y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di Tasso+ sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du Tasso+ et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:
- Instruktionerna för användning och översättningar tillhörande Tasso+ finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ használati utasítás és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- Tasso+-brugsanvisningen og -oversættelser findes på Tasso-nettstedet:
- Tasso+ -käyttöohjeet ja käänökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-ifu>

### TILTENKT FORMÅL

Gjør det mulig å selv ta en kapillær blodprøve sammen med et kompatibelt oppsamlingsreservoar.

### LEVERT INNHOLD

Hvert brett inneholder én Tasso+-enhet.

### AVFALLSHÅNDTERING

Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av brukte eller defekte skarpe gjenstander som biologisk farlig materiale.

### NØDVENDIGE MATERIALER (ikke levert)

- Kompatibelt rør, se produsentens merking
- Hansker (for helsepersonell)
- Alkoholserviett
- Bandasje
- Varmepakke eller annen oppvarmingsmetode for armen

### ADVARSLER

- Kun på resept.
- Kun engangsbruk.
- Skal ikke resteriliseres.
- Skal ikke brukes hvis posen har blitt åpnet eller skadet.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Mindre blåmerker eller restemerker kan forekomme på prøvetakingstedet.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Beregnet for å brukes selv eller av helsepersonell.
- Bruk i sittende stilling da besvimelse kan forekomme ved enhver blodprøvetaking.
- Ikke for bruk på spedbarnshæler.
- Brukere må validere bruken av produktet for sin spesifikke diagnostiske undersøkelse.
- Kun for utvortes bruk.

*Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten skal rapporteres til produsenten, den autoriserte representanten og den kompetente myndigheten i landet der brukeren og/eller pasienten er etablert.*

### SYMBOLER

-  Katalognummer
-  Partinummer
-  Utløpsdato
-  Kun til engangsbruk
-  Oppbevares ved 18–28 °C
-  Transport ved 25–85 % RF
-  Se bruksanvisningen
-  Denne enheten inneholder skarpe gjenstander
-  Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet
-  Kun på resept
-  Sterilisert ved bestråling
-  Skal ikke resteriliseres