


# Tasso+

PAKNINGSVEDLEGG MED BRUKSANVISNING  
K1013-01



**1.** Vask hendene før bruk. Helsepersonell må bruke hansker under blodprøven.

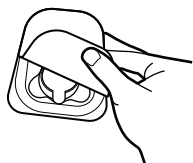

**2.** Ta ut enheten fra esken.



**3.** Skru av hetten fra det kompatible røret.



**4.** Med påfyllingslinjene vendt ut, trykk røret inn i enheten til det sitter tett.




**5.** Trekk fliken vekk fra den røde knappen.



**6.** Fjern det gjennomsiktige dekselet fra den røde knappen.



**7.** Forbered skulderen. Fest enheten til ren skulder og trykk på knappen for å starte prøvetakingen.

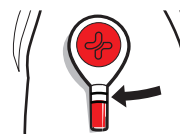

**8.** La røret fylles i 5 minutter. Fjern enheten hvis blodet når den øverste fyllingslinjen før tiden er ute.



**9.** Fjern enheten ved å skrelle den vekk fra den ene siden.



**10.** Fjern røret fra knappen med en liten vri og trekk ned.



**11.** Trykk hetten helt på røret. Bland i henhold til produsentens merking.

**Kontakt oss  
for hjelp:  
+1 800-257-2370**

## OVERSATTE INSTRUKSJONER

- The Tasso+ instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von Tasso+ finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de Tasso+ y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di Tasso+ sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du Tasso+ et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:
- Instruktionerna för användning och översättningar tillhörande Tasso+ finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ használati utasítás és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- Tasso+-brugsanvisningen og -oversættelser findes på Tasso-nettstedet:
- Tasso+ -käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-ifu>

## TILTENKT FORMÅL

Gjør det mulig å selv ta en kapillær blodprøve sammen med et kompatibelt oppsamlingsreservoar.

## LEVERT INNHOLD

Hvert brett inneholder én Tasso+-enhet.

## AVFALLSHÅNDTERING

Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av brukte eller defekte skarpe gjenstander som biologisk farlig materiale.

## NØDVENDIGE MATERIALER (ikke levert)










- Kompatibelt rør, se produsentens merking
- Hansker (for helsepersonell)
- Alkoholserviett
- Bandasje
- Varmepakke eller annen oppvarmingsmetode for armen

## ADVARSLER

- Kun på resept.
- Kun engangsbruk.
- Skal ikke resteriliseres.
- Skal ikke brukes hvis posen har blitt åpnet eller skadet.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Mindre blåmerker eller restemerker kan forekomme på prøvetakingstedet.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Beregnet for å brukes selv eller av helsepersonell.
- Bruk i sittende stilling da besvimelse kan forekomme ved enhver blodprøvetaking.
- Ikke for bruk på spedbarnshæler.
- Brukere må validere bruken av produktet for sin spesifikke diagnostiske undersøkelse.
- Kun for utvortes bruk.

*Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten skal rapporteres til produsenten, den autoriserte representanten og den kompetente myndigheten i landet der brukeren og/eller pasienten er etablert.*

## SYMBOLER

- |   |                          |   |   |
|---|--------------------------|---|---|
|  REF | Katalognummer            |  i | Se bruksanvisningen                         |
|  LOT | Partinummer              |  ⚠ | Denne enheten inneholder skarpe gjenstander |
|      | Utløpsdato               |    | Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet   |
|      | Kun til engangsbruk      |    | Kun på resept                               |
|      | Oppbevares ved 18–28 °C  |    | Sterilisert ved bestråling                  |
|      | Transport ved 25–85 % RF |    | Skal ikke resteriliseres                    |