

## FÖRPACKNINGSLAGA ANVÄNDNINGSPÅBUDNINGAR K1013-01



1. Tvätta händerna före användning. Vårdpersonal måste bära handskar under insamlingen.



2. Ta bort enheten från facket.



3. Vrid av locket från det kompatibla röret.



4. Håll fyllningslinjerna vända utåt och tryck ned röret i enheten tills det sitter tätt.




5. Dra bort fliken från den röda knappen.



6. Ta bort det genomskinliga plastskyddet från den röda knappen.



7. Förbered axeln. Sätt fast enheten på den rengjorda axeln och tryck på knappen för att starta insamlingen.

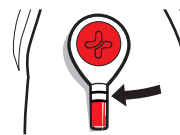

8. Vänta i 5 minuter på att röret fylls. Ta bort enheten om blodet när den översta fyllningslinjen innan tiden är slut.



9. Ta bort enheten genom att dra bort den från ena sidan.



10. Ta bort röret från knappen med en lätt vridning och dra det nedåt.



11. Snäpp fast locket helt på röret. Blanda enligt tillverkarens märkning.

**Kontakta oss  
för hjälp:  
+1 800-257-2370**

### ÖVERSÄTTA INSTRUKTIONER

- The Tasso+ instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von Tasso+ finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de Tasso+ y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di Tasso+ sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du Tasso+ et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:
- Instruksionerna för användning och översättningar tillhörande Tasso+ finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ használati utasítás és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- Tasso+-brugsanvisningen og -oversættelser findes på Tasso-nettstedet:
- Tasso+ -käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-ifu>

### AVSETT ÄNDAMÅL

Möjliggör självinsamling av ett kapillärblodprov i kombination med en kompatibel provtagningsbehållare.

### MEDFÖLJANDE MATERIAL

Varje bricka innehåller en Tasso+-enhet.

### KASSERING

Följ lokala riktlinjer för kassering av förbrukade eller defekta spetsar som biologiskt riskmaterial.

### NÖDVÄNDIGT MATERIAL (medföljer ej)

- Kompatibelt rör, se tillverkarens märkning
- Handskar (för vårdpersonal)
- Alkohol tork
- Bandage
- Värmpaket eller annan metod för uppvärmning av armen

### VARNINGAR

- Endast för receptbelagd användning.
- Får bara användas en gång.
- Sterilisera inte om enheten.
- Använd inte om enhetens förpackning har öppnats eller skadats.
- Håll utom räckhåll för barn.
- Mindre blåmärken eller kvarvarande märken kan uppstå runt provtagningsstället.
- Använd inte efter utgångsdatum.
- Avsedd för egen användning eller användning av vårdpersonal.
- Använd i sittande ställning då svimning kan inträffa vid blodprovtagning.
- Får inte användas på spädbarns hälar.
- Användare måste bekräfta användningen av produkten för avsedd diagnostisk provtagning.
- Endast för utvärtes bruk.

*Alla allvariga tillbud som inträffar i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren, den auktoriserade representanten och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten bor.*

### SYMBOLER

- REF** Katalognummer
- LOT** Partinummer
- Sista användningsdatum
- Får bara användas en gång
- Förvaring vid 18–28 °C
- Transport vid 25–85 % RF
- Rx ONLY** Endast för receptbelagd användning
- STERILE R** Steriliserad med bestrålning
- Sterilisera inte om enheten
- i** Följ användningsinstruktionerna
- Den här enheten innehåller vassa nålar
- Använd inte om förpackningen är skadad
- Sterilisera inte om enheten

**CE** 2797 CE-märke

 Importör