

KÄYTTÖTARKOITUS

Mahdollistaa kapillaariverinäytteen keräämisen itse yhdessä yhteensopivan näytteenottoosäillön kanssa, joka lähetetään akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Tasso-verilansetti-laite
- Yhteensopiva putki, katso valmistajan merkinnät
- Lämpöpakkaus
- Side
- Alkoholipyyhe
- Palautuspussi, jossa on imukykyinen tyyny
- Käyttöohjeet

HÄVITTÄMINEN

Noudata paikallisia ohjeita käytettyjen tai viallisten terävien instrumenttien hävittämisestä biovaarallisena materiaalina.

VAROITUKSET

- Vain reseptillä.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Vain kertakäyttöön.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Näytteenottokohdassa voi esiintyä vähäisiä mustelmia tai jälkiä.
- Älä steriloï uudelleen.
- Älä käytä, jos laitteen pakkaus on avattu tai vahingoittunut.
- Vain ulkoiseen käyttöön.
- Tarkoitettu omaan käyttöön tai terveydenhuollon tarjoajan käyttöön.
- Käytä istuen, koska pyörtymistä voi ilmetä minkä tahansa verinäytteenottotoimenpiteen yhteydessä.
- Katso yksittäisten komponenttien valmistajan ohjeet.
- Ei käytettäväksi pikkulasten kantapäihin.
- Käyttäjien on validoitava tuotteen käyttö kyseiseen diagnostiseen määritykseen.

KÄÄNNETYT OHJEET

- The Tasso+ Kit instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung für das Tasso+ Kit und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso y las traducciones del kit Tasso+ se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso del kit Tasso+ e le relative traduzioni sono reperibili sul sito Web Tasso:
- Les instructions d'utilisation d'origines du kit Tasso+ ainsi que les traductions correspondantes sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ Kit en vertalingen zijn beschikbaar op de Tasso website:
- Bruksanvisningen och översättningarna till Tasso+ Kit finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ Kit használati utasítása és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
- Návod na pouzitie a preklady pre sadu Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+-sættets brugsanvisning og oversættelser kan findes på Tassos hjemmeside:
- Bruksanvisninger for Tasso+ Kit og oversættelser findes på Tassos nettsted:
- Tasso+ -setin käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu>


Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle, valtuutetulle edustajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sidoksissa.

SYMBOLIT

REF Luettelonumero

LOT Erän numero

 Viimeinen käyttöpäivä

 Vain kertakäyttö

 Säilytetään 18-25 °C:ssä

 Kuljetus 25-85% RH

CE 2797 CE-merkintä

MD Lääkinnällinen laite

 Katso käyttöohjeet

 Tämä laite sisältää teräviä esineitä

 Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut

Rx ONLY Vain reseptillä

STERILE R Steriloitu säteilyttämällä

 Älä steriloï uudelleen

 Maahantuojat

 Tasso, Inc.
400 2nd Ave. W
Seattle, WA 98119 Yhdysvallat
www.tassoinc.com

EC REP Emergo Europe BV
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Alankomaat

 MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM Haag
Alankomaat

PN0763-19, 01

 Tasso

Tasso+-pakkaus
Käyttöohjeet

1. Valmistele

Lisätarvikkeet:


Ajastin

Kynä


Karvanpoistoterä



1. Pese kädet ennen käyttöä. Terveystieteiden on käytettävä käsiainetta näytteenoton aikana.

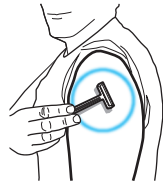


2. Laite asetetaan olkavarteen - parhaan tuloksen saavuttamiseksi poista ylimääräiset karvat.

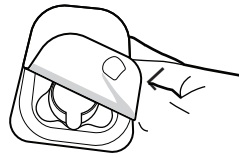

3. Kerää kaikki tarvittavat tavarat. Poista nappi lokerosta.




4. Kierrä ja irrota korkki putkesta.

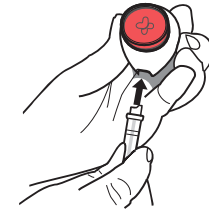


5. Paina putki laitteeseen, kunnes se on tiukasti kiinni siten, että täyttöviivat osoittavat ulospäin.




Verenvirtauksen nosto näytteenotokohdassa

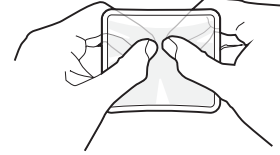

6. Seuraa lämpöpakkauksen ohjeita aktivoitaksesi. Jos pakkaus ei kuumene, hävitä se ja käytä sen sijaan kättä.

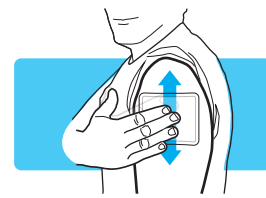

7. Hiero lämpöpakkausta tai kättä ylös ja alas käyttäjän olkapäätä 2 minuutin ajan lämmittääksesi ja lisätäksesi veren virtausta.

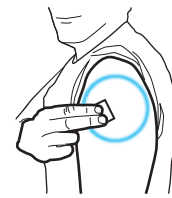

8. Puhdista alue alkoholityynyllä ja anna kuivua.




9. Poista kirkas suojus punaisesta napista.


2. Näytteenotto




Et ehkä tunne laitetta. Anna vaikuttaa 5 minuuttia TAI vähemmän, jos veri on fill-viivalla.

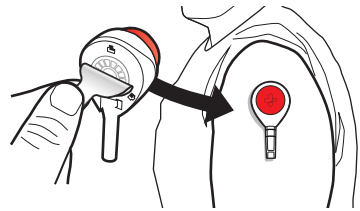


10. Irrota suoja laitteesta ja kiinnitä laite olkavarteen. Roikuta käsi suoraan alaspäin sivulle.

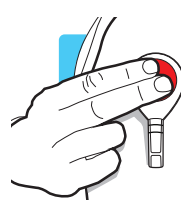

11. Paina painike KERRAN kokonaan alas ja vapauta se. Aseta ajastin 5 minuutiksi. Tarkkaile putken täyttöastetta tarvittaessa peilin avulla.

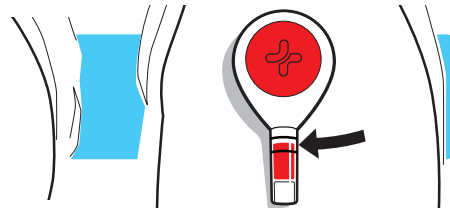


12. Verta ei välttämättä näy 1-2 minuuttiin. Poista laite 5 kokonaisminuutin kuluttua tai aikaisemmin, jos veri saavuttaa ylärajan ennen kuin aika on kulunut. Älä täytä yliviivan yli!

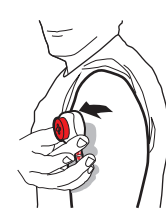

13. Irrota laite irrottamalla se yhdeltä puolelta. Tarvittaessa kiinnitä mukana toimitettu sidos.



14. Irrota putki laitteesta hieman kiertämällä ja vetämällä alaspäin.

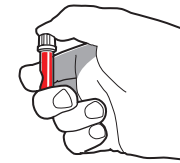

15. Napsauta korkki kokonaan putken päälle.




16. Käännä putki varovasti 10 kertaa veren sekoittamiseksi. Napauta tai heilauta putkea, jotta veri saadaan liikkeelle. Putken pohjassa oleva geeli ei sekoitu veren kanssa.


3. Lähetys




17. Kirjoita käyttäjän syntymäaika (MM/DD/YYYY) putken etikettiin viivakoodin yläpuolelle.

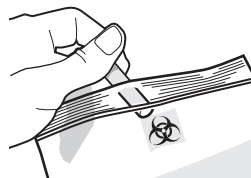

18. Aseta putki kirkkaaseen palautuspussiin ja paina sinetöidäksesi. Älä poista tyyntyä.

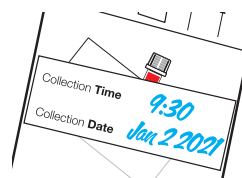

19. Merkitse aika ja päivämäärä palautuspussin etikettiin.

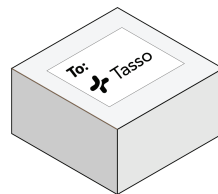

20. Jos palautat verinäytteen laboratorioon pakettipalvelun kautta, noudata annettuja lähetysohjeita.



21. Noudata paikallisia ohjeita käytettyjen materiaalien hävittämisestä.



22. Pese kädet käytön jälkeen.



Käytätkö Tassoa ensimmäistä kertaa? Skannaa QR-koodi päästäksesi käyttämään opetusvideota tai kirjoita alla oleva URL-osoite selaimesi:

www.tasso.com/tassoplus-video
Ota meihin yhteyttä saadaksesi apua:
+1 800-257-2370