


TASSO-M20

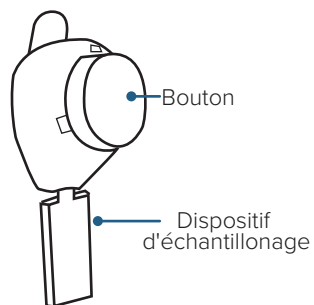

VIDÉO


PRIMO-UTILISATEURS

Dirigez la caméra de votre téléphone ici pour regarder :



ou allez à www.tassoinc.com/tasso-m20-video

PRÉPARATION

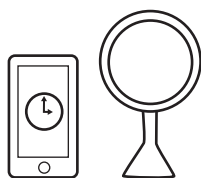

1. Procurez-vous un chronomètre et un miroir.

Vous en aurez besoin pendant la collecte.



2. Frottez-vous le bras rapidement et fermement juste sous l'épaule.

Frottez jusqu'à ce que le bras soit très chaud pour faciliter la circulation du sang.




3. Nettoyez le bras avec un tampon d'alcool.




4. Ouvrez la pochette du dispositif en retirant les couches blanches et transparentes.

COLLECTE

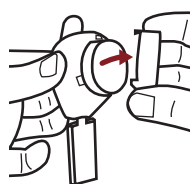


5. Retirez le bouchon en plastique transparent du bouton rouge.

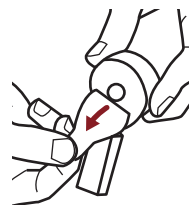

6. Décollez l'onglet de papier derrière le bouton rouge.

Gardez le dispositif pointé vers le bas.

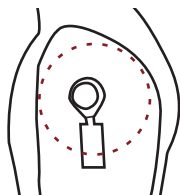


7. Appliquez le dispositif fermement sur l'épaule.

Ne l'enlevez pas une fois qu'il est appliqué.



8. Appuyez fermement et rapidement sur le bouton jusqu'au bout. Attendez deux secondes avant de le relâcher.

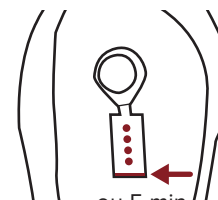

9. Démarrez une minuterie de 5 minutes.

Gardez le bras le long du corps et regardez les points se remplir avec un miroir. Vous ne verrez pas de sang tout de suite.




10. Si le sang apparaît en bas du dispositif après 5 minutes ou moins, enlevez le dispositif.

RETOUR




11. Décollez le film transparent pour dégager l'aération du dispositif.

Appliquez l'étiquette du code-barres au dos de la dosette, si disponible.

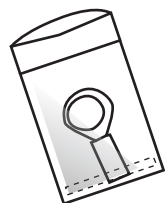

12. Placez le dispositif dans le sac hermétique de retour et scellez le sac.


Laissez les packs d'humidité dans le sac.

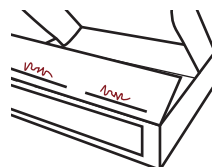

13. Écrivez la date et l'heure de la collecte à l'intérieur du rabat de la boîte.



14. Placez le sac dans la boîte et scellez avec le ruban adhésif.

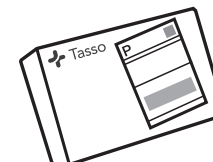

15. Suivez les instructions fournies pour renvoyer votre échantillon au laboratoire.

TASSO ONDEMAND

TASSO-M20

Contactez-nous pour de l'assistance:
1-408-708-8451



INSTRUCTIONS TRADUITES

- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
- Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
- Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
- As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
- Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
- Указания за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
- Návod k použití a překlady Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso-M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
- Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
- Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
- As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
- Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
- Указания за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
- Návod k použití a překlady Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso-M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>

Tasso, Inc.
1631 15th Ave. W., Suite 105
Seattle, WA 98119 USA



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



MedEnvo
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

PN0365-04_03

USAGE CONFORME

Le Tasso-M20 est utilisé pour collecter, stocker et transporter du sang capillaire en vrac dans un laboratoire centralisé. Il doit être utilisé dans un cadre non clinique pour une utilisation sur des populations adultes.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le Tasso-M20 est un dispositif de collecte stérile, jetable et intégré. Il comprend un bouton et un dispositif de collecte. Le bouton sera livré à un laboratoire centralisé pour analyse. Un sac de retour avec un tampon absorbant est joint au kit.

STOCKAGE ET STABILITÉ

Le Tasso-M20 doit être stocké à température ambiante entre 18 °C et 28 °C (entre 64 °F et 82 °F) et doit être utilisé avant la date d'expiration. Les prélèvements sont expédiés à température ambiante à l'aide des matériaux d'expédition fournis.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Lors de la collecte d'un prélèvement, le dispositif est placé sur la peau en haut du bras pendant quelques minutes. Une aiguille stérile pique la peau et le bouton attire le sang capillaire dans le dispositif de collecte à l'aide d'un aspirateur. Après une période prédéfinie, ou lorsque le dispositif de collecte est plein, le dispositif est retiré et livré au laboratoire. Suivez les instructions détaillées pendant l'utilisation.

CONTENU DU KIT

Dispositif de collecte de sang Tasso
Tampon d'alcool
Pansement
Sac de retour avec tampon absorbant
Mode d'emploi

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur les talons des bébés.

ELIMINATION

Les dispositifs défectueux doivent être éliminés conformément aux dispositions locales ou nationales pour l'élimination des objets tranchants.

PRÉCAUTIONS & AVERTISSEMENTS

- Prescription Sur ordonnance uniquement.
- Pour utilisation de diagnostic in vitro.
- Ne pas stériliser à nouveau.
- Ne pas utiliser si la pochette a été ouverte ou endommagée.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Usage unique.
- Une ecchymose mineure peut se produire autour du site de prélèvement.
- Utiliser en position assise dû au risque d'évanouissement relié aux procédures de collecte de sang.
- Observer les précautions universelles quant aux risques biologiques.
- Conserver hors de la portée des enfants.

SYMBOLES

Numéro de catalogue	REF
Numéro de lot	LOT
Date limite d'utilisation	
Consulter le mode d'emploi	
Ce dispositif contient un objet tranchant	
Ne pas utiliser si le paquet est abîmé	
À usage unique	
Ne pas stériliser à nouveau	
Risque biologique	
Entreposer entre 18° C et 28° C	
Transportez à une humidité relative de 25 à 85 %	
Marque CE	
RX ONLY	
Utilisation sur ordonnance uniquement	
Stérilisé par irradiation	STERILE
Importateur	