


## TASSO-M20




## ビデオ

初回ユーザー  
携帯のカメラをここに向  
けて見る、

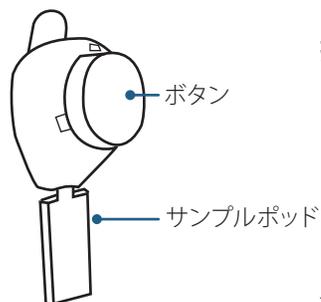

または「準備する」に進みます  
[www.tassoinc.com/tasso-m20-video](http://www.tassoinc.com/tasso-m20-video)

## 準備

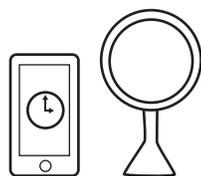

1. タイマーと鏡を  
用意します。  
採血時に必要になり  
ます。



2. 腕を肩の下あたりで  
素早くしっかりとこすり  
ます。  
血流が良くなるように、温か  
くなるまで揉みほぐします。




3. アルコールパッドで  
腕を清拭します。




4. 白と透明の層を引  
き離してデバイスの  
袋を開けます。

## 採血

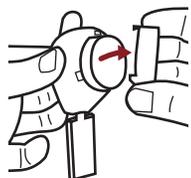

5. 赤いボタンを覆っ  
ている透明のプラス  
チックカバーを外し  
ます。

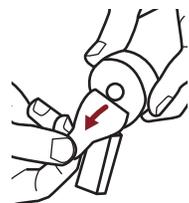


6. 赤いボタンの  
後ろの紙タブを  
はがします。  
サンプルポッドを下  
に向けます。



7. デバイスを肩  
に装着します。  
一度装着したら外さ  
ないでください。



8. ボタンを素早く、し  
っかりと、それ以上押  
せなくなるまで押しま  
す。2秒ほど待ってか  
ら離してください。

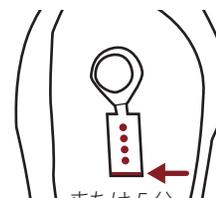

9. 5分間のタイマ  
ーを開始します。  
腕を体の横につけ、鏡  
でドットが満杯になる  
のを見ます。すぐには  
血が見えませんが



10. 5分後、または、ポ  
ッドの底に血液が見え  
たら、デバイスを剥が  
します。


## 返送



11. 透明なフィルムを剥  
がすと、サンプルポッド  
のVENTが現れます。  
バーコードラベルがある場  
合には、容器の後ろに貼付  
してください。



12. デバイスをアルミ  
ホイルの返却バッグ  
に入れて密封します。  
水分パックは袋に入れた  
ままにしておきます。

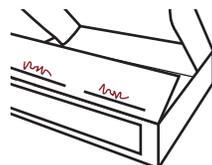

13. 箱の内側のフラ  
ップに採血日時を記  
入します。



14. 袋を箱に入れ、  
帯で封をします。



15. 添付の指示にした  
がって、試験機関に検  
体を送ってください。

# TASSO ONDEMAND

## TASSO-M20

### 使用上の注意



### 説明書の翻訳版

- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
- Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
- Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
- As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
- Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
- Указания за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
- Návod k použití a překlady Tasso-M20 naleznete na webových stránkách společnosti Tasso:
- A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
- Tasso-M20の使用説明書と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
- Tasso-M20使用说明书和译文可在Tasso网站上找到:
- Инструкция за експлуатация на Tasso-M20 pазнимии мовими знаходиться на веб-сайт компании Tasso:
- Инструкция по эксплуатации к Tasso-M20 на разных языках находится на веб-сайте компании Tasso:
- Návod na použití zariadenia Tasso-M20 a preklady zariadenia Tasso-M20 a preklady stránke Tasso:

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>



Tasso, Inc.  
1631 15th Ave. W, Suite 105  
Seattle, WA 98119 USA

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Medenovy  
Prinses Marijehplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

### 使用目的

Tasso-M20は、集中管理された検査室で検査するための毛細血管の血液を採取、保管、輸送するために使用されます。成人を対象とした非臨床での使用を前提としています。

### 器具の説明

Tasso-M20は、無菌・使い捨ての一体型採血キットです。ポタンは取り外し可能なキヤツで覆われています。サンプルの前部に剥離紙の巻を剥がします。サンプルの採取の際には矢伸ばする可能性があるため、座った状態で使用してください。

生物学的リスクに対する普通の予防策を守ってください。お子様の手の届かないところに保管してください。

### 保存性・安定性

Tasso-M20は室温18℃～28℃ (64°F～82°F)で保存してください。有効期限まで使用可能です。サンプルは付属の梱包物を用いて常温で輸送されます。

### 操作の原理

サンプルを採取する際には、サンプルを上腕部の皮膚に2、3分間貼り付けます。滅菌した針で皮膚を穿刺し、ポタンによって真空状態で毛細血管の血液がサンプルポットに吸引されます。あらかじめ設定された時間が経過するか、サンプルポットが満杯になったら、サンプルを取り外し、検査室に届けさせていただきます。使用時には詳細な指示に従ってください。

### キットの内容

Tasso採血キット  
アルコールキット  
絆創膏  
吸水パッド付き返却キット  
使用上の注意

### 禁忌事項

・乳幼児のかかとは使用できません。

### 廃棄物

欠陥のあるキット又は、使用済みの鋭利物の廃棄に関する地域または国のガイドラインに従って廃棄してください。

### 注意・警告


- 処方箋が必要です。
- 体外診断用。
- 再滅菌しないでください。
- 开封されたら破損してたりする場合は使用しないでください。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 単回使用のみに限ります。
- サンプル採血部位の周囲に軽微な打撲が生じることがあります。
- 採血の際には矢伸ばする可能性があるため、座った状態で使用してください。
- 生物学的リスクに対する普通の予防策を守ってください。
- お子様の手が届かないところに保管してください。

### サンプル


REF カタログ番号  
LOT ロット番号




使用上の注意を確認してください

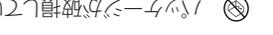


この器具には鋭利物が含まれています

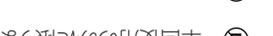


再滅菌しないでください

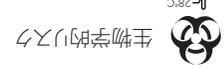


生物学的リスク

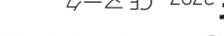

18～28℃で保存

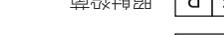

輸送時の相対湿度は25%から85% CEマーク



照射殺菌



処方箋による使用のみ可能