


TASSO-M20

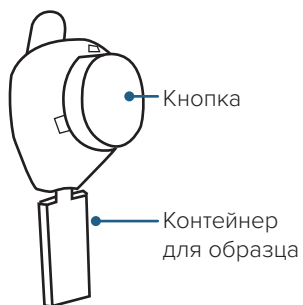

ВИДЕО


НОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Для просмотра
отсканируйте это камерой
своего телефона:



или посетите
www.tassoinc.com/tasso-m20-video

ПОДГОТОВКА

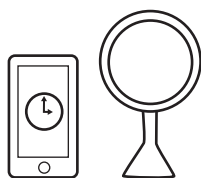

1. Возьмите таймер и зеркало.

Они понадобятся во
время забора.




2. Быстро и крепко потрите руку немного ниже плеча.

Растирайте, пока это место
не нагреется, чтобы
улучшить кровообращение.




3. Протрите руку спиртовой салфеткой.

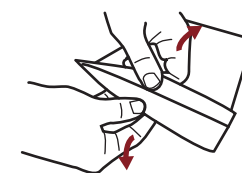


4. Откройте подушечку устройства, разделив белый и прозрачный слои.

ЗАБОР

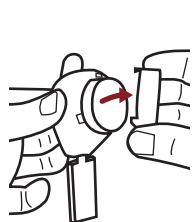


5. Снимите прозрачную пластиковую наклейку с красной кнопки.

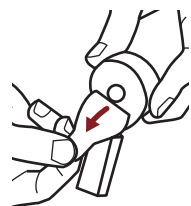

6. Отклейте кусочек бумаги с красной кнопки.

Контейнер для
образца должен быть
направлен вниз.

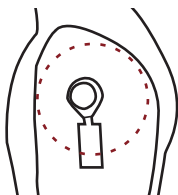


7. Прижмите устройство к плечу.

После этого уже не
убирайте.



8. Быстро и уверенно прижмите кнопку до упора Подождите две секунды и отпустите.

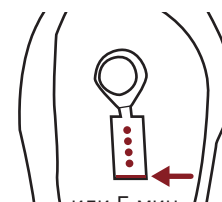

9. Включите пятиминутный таймер.

Прижмите руку к телу и
следите за заполнением
отверстий в зеркале.
Кровь появится не сразу.




10. Через пять минут или раньше, если кровь появится на дне контейнера, можете отклеить устройство.

ОТПРАВКА НАЗАД




11. Отклейте прозрачную пленку, чтобы отверстие контейнера для образца было видно.

Наклейте ярлык со штрих-кодом, если
такой предоставлен, на заднюю стенку
коробочки.

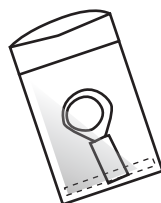

12. Положите устройство в пластиковый пакет и запечатайте.


Оставьте мешочки для
контроля влажности в
пакете.

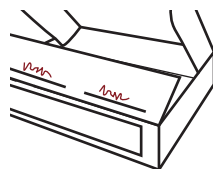

13. Укажите дату и время забора на внутреннем отвороте.



14. Вложите пакет в коробку и заклейте пленкой.

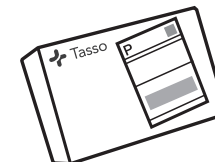

15. Следуйте предоставленным инструкциям по возвращению Вашего образца в лабораторию.

TASSO ONDEMAND

TASSO-M20

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:

• Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:

• Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:

• Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:

• De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:

• Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:

• As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:

• Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:

• Указания за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:

• Návod k použití a preklady Tasso-M20 náležne na webových stránkách spoločnosti Tasso:

• A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:

• Tasso-M20の使用方法と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:

• Tasso-M20使用说明书和译文可在Tasso网站上找到:

• Инструкция по эксплуатации к Tasso-M20 на разных языках находится на веб-сайте компании Tasso:

• Návod na použití zariadenia Tasso-M20 a preklady zariadenia Tasso-M20 a preklady zariadenia Tasso-M20 na webovej stránke Tasso:

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>



Tasso, Inc.
1631 15th Ave., Suite 105
Seattle, WA 98119 USA



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

PN0365-15_02

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Tasso-M20 предназначен для забора, хранения и перевозаки капиллярной крови в целях проведения анализа в централизованной лаборатории. Устройство предназначено для использования взрослыми в анализ. Внутри пакета для отправки имеется гироскопический мешочек.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Tasso-M20 – это стерильное, одноразовое, комплексное устройство для забора образцов. Оно состоит из кнопки и контейнера для образца. Кнопка закрыта съемным колпачком. Перед забором необходимо отклеить кусочек бумаги. После забора устройство необходимо отправить в централизованную лабораторию на анализ. Внутри пакета для отправки имеется гироскопический мешочек.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Tasso-M20 необходимо хранить при комнатной температуре 18 °C – 28 °C (64 °F – 82 °F) и можно использовать до истечения срока годности. Образцы следует отправлять в условиях комнатной температуры с использованием материалов для отправки.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Во время забора образца устройство прикладывает к коже предельная сила, которая направляет капиллярную кровь в контейнер для образца. По истечении указанного времени или после завершения контейнера для образца устройство снимается и отправляется в лабораторию. Пользуйтесь руководством по подробной инструкции.

СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА

Устройство для забора крови Tasso
Спиртовая салфетка
Бинт
Пакет для отправки с гироскопическим мешочком
Инструкция по использованию на патках новорожденных.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Не использовать на патках новорожденных.

УТИЛИЗАЦИЯ

Несравнимо устройство следует утилизировать в соответствии с местными или общегосударственными правилами утилизации использованных острых предметов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Предупреждения и предостережения
- Для диагностики только в лабораторных условиях.
- Не предусматривает повторной стерилизации.
- Не использовать, если подушка была открыта или повреждена.
- Не использовать, если срок годности истек.
- Не использовать, если срок годности истек. Только для одноразового использования.
- В месте забора образца может появиться небольшой синяк.
- Использовать в соответствии с инструкцией.
- Процедура забора крови может вызвать обморок.
- Сообщайте стандартные правила предупреждения биологических рисков.
- Храните в недоступном для детей месте.



Каталожный номер



Номер партии



Использовать до



Смотрите в инструкции по эксплуатации



Данное устройство содержит острые элементы



Не используйте, если упаковка повреждена



Только для одноразового использования



Не предусматривает повторной стерилизации



Биологический риск



Хранить при 18-28 °C



Осуществляйте транспортировку при 25-85 % OB



Знак CE



Выдается только по рецепту



Стерилизовано облучением



Импортер