



1. Lavez-vous les mains avant utilisation. Les professionnels de la santé doivent porter des gants pendant le prélèvement.



2. Retirez le bouton du sachet.



3. Dévissez le bouchon du tube compatible.



4. Enfoncez le tube à fond dans le dispositif avec les lignes de remplissage vers l'extérieur.




5. Décollez la pellicule du bouton rouge.



6. Retirez le couvercle transparent du bouton rouge.



7. Préparez l'épaule. Collez le dispositif sur l'épaule propre et appuyez sur le bouton pour commencer le prélèvement.

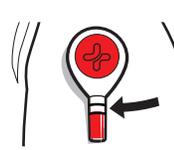

8. Laissez le tube se remplir pendant 5 minutes. Retirez le dispositif si le sang atteint la ligne supérieure avant la fin du temps prévu.



9. Retirez le dispositif en le décollant à partir d'un des côtés.



10. Retirez le tube du bouton en le tournant légèrement et en tirant vers le bas.



11. Enfoncez le capuchon à fond sur le tube. Mélangez selon l'étiquetage du fabricant.

Contactez-nous pour obtenir de l'aide : 1-800-257-2370

INSTRUCTIONS TRADUITES

- The TassoOne Plus instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von TassoOne Plus finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de TassoOne Plus y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di TassoOne Plus sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du TassoOne Plus et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de TassoOne Plus en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:

- Instruktionerna för användning och översättningar tillhörande TassoOne Plus finns på Tassos webbplats:
- A TassoOne Plus használati utasítás és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na pouzitie a preklady TassoOne Plus nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- TassoOne Plus-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- TassoOne Plus-bruksanvisningen og -oversættelser finnes på Tasso-nettstedet:
- TassoOne Plus -käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoone.com/eu/tassoone-plus-ifu>

UTILISATION PRÉVUE

Permet l'auto-prélèvement d'un échantillon de sang capillaire quand utilisé avec un réservoir de prélèvement d'échantillon compatible.

MATÉRIEL FOURNI

Chaque boîte contient un dispositif TassoOne Plus.

MISE AU REBUT

Veillez suivre les directives locales pour l'élimination des objets coupants usagés ou défectueux en tant que produit à risque biologique.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (non fourni)

- Tube compatible, se reporter à l'étiquetage du fabricant.
- Gants (pour les prestataires de soins)
- Tampon alcoolisé
- Pansement
- Coussin chauffant ou autre méthode de réchauffement du bras

MISES EN GARDE

- Utilisation sur ordonnance uniquement.
- Exclusivement à usage unique.
- Ne pas stériliser.
- Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou endommagé.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Une ecchymose mineure ou des marques résiduelles peuvent survenir au site de prélèvement de l'échantillon.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Conçu pour être auto-utilisé ou utilisé par un professionnel de santé.
- Utiliser sur un sujet assis, car un évanouissement peut survenir avec toute procédure de prise de sang.
- Ne pas utiliser sur le talon de nourrissons.
- Les utilisateurs doivent vérifier que l'utilisation du produit correspond à leurs tests diagnostiques spécifiques.
- Pour usage externe uniquement.

Tout événement indésirable grave survenu en rapport avec ce dispositif doit être signalé au fabricant, au représentant autorisé et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou les patients sont établis.

SYMBOLES

- | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| | Référence du catalogue | | Consulter le mode d'emploi |
| | Numéro du lot | | Ce dispositif contient des objets coupants |
| | Date limite d'utilisation | | Ne pas utiliser si le paquet est endommagé |
| | Exclusivement à usage unique | | Utilisation sur ordonnance uniquement |
| | Conserver entre 18°C et 28°C | | Stérilisé par irradiation |
| | Transporter dans une HR de 25% à 85% | | Ne pas stériliser |
| | Marquage CE | | Dispositif médical |
| | Importateur | | |