



1. Vask hendene før bruk. Helsepersonell må bruke hansker under blodprøven.



2. Fjern knappen fra posen.



3. Skru av hetten fra det compatible røret.



4. Med påfyllingslinjene vendt ut, trykk røret inn i enheten til det sitter tett.




5. Trekk fliken vekk fra den røde knappen.



6. Fjern det gjennomsiktige dekelet fra den røde knappen.



7. Forbered skulderen. Fest enheten til ren skulder og trykk på knappen for å starte prøvetakingen.

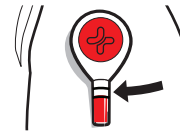

8. La røret fylles i 5 minutter. Fjern enheten hvis blodet når den øverste fyllingslinjen før tiden er ute.



9. Fjern enheten ved å skrelle den vekk fra den ene siden.



10. Fjern røret fra knappen med en liten vri og trekk ned.



11. Trykk hetten helt på røret. Bland i henhold til produsentens merking.

Kontakt oss for hjelp:
1-800-257-2370

OVERSATTE INSTRUKSJONER

- The TassoOne Plus instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von TassoOne Plus finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de TassoOne Plus y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di TassoOne Plus sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du TassoOne Plus et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de TassoOne Plus en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:

- Instruksionerna för användning och översättningar tillhörande TassoOne Plus finns på Tassos webbplats:
- A TassoOne Plus használati utasítás és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady TassoOne Plus nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- TassoOne Plus-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- TassoOne Plus-brugsanvisningen og -oversættelser findes på Tasso-nettstedet:
- TassoOne Plus -käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoone.com/eu/tassoone-plus-ifu>

TILTENKT FORMÅL

Gjør det mulig å selv ta en kapillær blodprøve sammen med et kompatibelt oppsamlingsreservoar.

LEVERT INNHOLD

Hver eske inneholder en TassoOne Plus enhet.

AVFALLSHÅNDTERING

Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av brukte eller defekte skarpe gjenstander som biologisk farlig materiale.

NØDVENDIGE MATERIALER (ikke levert)
















- Kompatibelt rør, se produsentens merking
- Hansker (for helsepersonell)
- Alkoholserviett
- Bandasje
- Varmepakke eller annen oppvarmingsmetode for armen

ADVARSLER

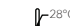- Kun på resept.
- Kun engangsbruk.
- Skal ikke resteriliseres.
- Skal ikke brukes hvis posen har blitt åpnet eller skadet.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Mindre blåmerker eller restemerker kan forekomme på prøvetakingstedet.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Beregnet for å brukes selv eller av helsepersonell.
- Bruk i sittende stilling da besvimelse kan forekomme ved enhver blodprøvetaking.
- Ikke for bruk på spedbarnshæler.
- Brukere må validere bruken av produktet for sin spesifikke diagnostiske undersøkelse.
- Kun for utvortes bruk.

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten skal rapporteres til produsenten, den autoriserte representanten og den kompetente myndigheten i landet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

SYMBOLER

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---|
|  | Katalognummer |  | Se bruksanvisningen |
|  | Partinummer |  | Denne enheten inneholder skarpe gjenstander |
|  | Utløpsdato |  | Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet |
|  | Kun til engangsbruk |  | Kun på resept |
|  | Oppbevares ved 18–28 °C |  | Sterilisert ved bestråling |
|  | Transport ved 25–85 % RF |  | Skal ikke resteriliseres |
|  | CE-merke |  | Medisinsk enhet |
|  | Importør | | |