

TassoOne Plus

PRÍBALOVÝ LETÁK S NÁVODOM NA POUŽITIE



1. Pred použitím si umyte ruky. Zdravotníckí pracovníci musia mať počas odberu nasadené rukavice.



2. Vyberte tlačidlo z puzdra.



3. Odskrutkujte uzáver z kompatibilnej skúmavky.



4. S plniacimi čiarami smerujúcimi von zatlačte skúmavku do zariadenia, až kým nebude pevne držať.




5. Odlepte nálepku z červeného tlačidla.



6. Odstráňte priehľadný kryt z červeného tlačidla.



7. Pripravte si rameno. Priložte zariadenie k čistému ramenu a stlačením tlačidla spustíte odber.

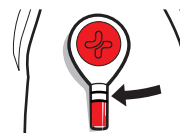

8. Nechajte skúmavku plniť 5 minút. Ak krv dosiahne hornú hranicu naplnenia pred uplynutím času, zariadenie odstráňte.



9. Odstráňte zariadenie odlúpnutím z jednej strany.



10. Skúmavku odstráňte z tlačidla miernym pootočením a potiahnite ju nadol.



11. Uzáver úplne zacvaknite na skúmavku. Premiešajte podľa označenia výrobcu.

V prípade potreby nás kontaktujte na čísle: 1-800-257-2370

PRELOŽENÉ POKYNY

- The TassoOne Plus instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von TassoOne Plus finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de TassoOne Plus y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di TassoOne Plus sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du TassoOne Plus et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de TassoOne Plus en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:

- Instruktionerna för användning och översättningar tillhörande TassoOne Plus finns på Tassos webbplats:
- A TassoOne Plus használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady TassoOne Plus nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- TassoOne Plus-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- TassoOne Plus-brugsanvisningen og -oversættelser findes på Tasso-nettstedet:
- TassoOne Plus -käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoone-plus-ifu>

URČENÝ ÚČEL

Umožňuje samostatný odber vzorky kapilárnej krvi v spojení s kompatibilným zásobníkom na odber vzorky.

DODANÉ MATERIÁLY

Každé balenie obsahuje jedno zariadenie TassoOne Plus.

LIKVIDÁCIA

Dodržiavajte miestne pokyny na likvidáciu použitých alebo poškodených ostrých predmetov ako biologicky nebezpečného materiálu.

POTREBNÉ MATERIÁLY (nie sú dodané)

- Kompatibilná skúmavka, pozri označenie výrobcu
- Rukavice (pre zdravotníckych pracovníkov)
- Alkoholový tampón
- Obväz
- Zahrievacia podložka alebo iná metóda zahrievania ramena

VÝSTRAHY

- Len na predpis.
- Len na jedno použitie.
- Nesterilizujte opakovane.
- Nepoužívajte, ak bolo puzdro otvorené alebo poškodené.
- Udržujte z dosahu detí.
- Na mieste odberu vzorky sa môžu vyskytnúť drobné modriny alebo zvyškové nečistoty.
- Nepoužívajte po dátume spotreby.
- Určené na samostatné použitie alebo použitie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
- Používajte v sede, pretože pri akomkoľvek odbere krvi môže dôjsť k mdlobám.
- Nie je určené na použitie na detské päty.
- Používatelia musia overiť použitie produktu pre svoju špecifickú diagnostickú analýzu.
- Len na vonkajšie použitie.

Akýkoľvek závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti so zariadením, by sa mal nahlásiť výrobcovi, autorizovanému zástupcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.

ZNAČKY

- | | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| | Katalógové číslo | | Prečítajte si návod na použitie |
| | Číslo šarže | | Toto zariadenie obsahuje ostré predmety |
| | Dátum spotreby | | Ak je balenie poškodené, zariadenie nepoužívajte |
| | Len na jedno použitie | | Len na predpis |
| | Uschovajte pri 18 – 28 °C | | Sterilizované ožiarením |
| | Prepravujte pri 25 – 85 % RH | | Nesterilizujte opakovane |
| | CE označenie | | Zdravotnícke zariadenie |
| | Importér | | |