

INSTRUCCIONES DE USO EN EL PROSPECTO DEL PAQUETE



1. Lávese las manos antes de usar. Los trabajadores de la salud deben usar guantes durante la recolección.



2. Retire el botón de la bolsa.



3. Gire y retire la tapa del tubo compatible.



4. Con las líneas de llenado apuntando hacia afuera, presione el tubo dentro del dispositivo hasta que quede ajustado.




5. Despegue la pestaña del botón rojo.



6. Retire la cubierta transparente del botón rojo.



7. Prepare el hombro. Adhiera el dispositivo al hombro limpio y presione el botón para iniciar la recolección.

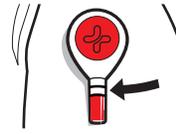

8. Deje que el tubo se llene durante 5 minutos. Retire el dispositivo si la sangre llega hasta la línea de llenado superior antes de que se acabe el tiempo.



9. Retire el dispositivo desprendiendo por un lado.



10. Retire el tubo del botón con un ligero giro y tire hacia abajo.



11. Encaje la tapa completamente en el tubo. Mezcle según el etiquetado del fabricante.

Contáctenos para obtener ayuda: 1-800-257-2370

INSTRUCCIONES TRADUCIDAS

- The TassoOne Plus instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von TassoOne Plus finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de TassoOne Plus y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di TassoOne Plus sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du TassoOne Plus et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de TassoOne Plus en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:

- Instruktionerna för användning och översättningar tillhörande TassoOne Plus finns på Tassos webbplats:
- A TassoOne Plus használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady TassoOne Plus nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- TassoOne Plus-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- TassoOne Plus-brugsanvisningen og -oversættelser findes på Tasso-nettstedet:
- TassoOne Plus -käyttöohjeet ja käänökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoone-plus-ifu>

PROPÓSITO

Permite la recolección por uno mismo de una muestra de sangre capilar junto con un contenedor para la recolección de muestras compatible.

MATERIALES PROPORCIONADOS

Cada caja contiene un dispositivo TassoOne Plus.

PARA DESECHAR

Siga las pautas locales para desechar objetos punzantes usados o defectuosos como materiales de riesgo biológico.

MATERIALES REQUERIDOS (no proporcionados)

- Tubo compatible; consulte el etiquetado del fabricante
- Guantes (para proveedores de atención médica)
- Hisopo con alcohol
- Venda
- Compresa térmica u otro método de calentamiento del brazo

ADVERTENCIAS

- Uso con prescripción exclusivamente.
- Para un solo uso.
- No volver a esterilizar.
- No usar si la bolsa se ha abierto o dañado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Pueden aparecer hematomas menores o marcas residuales en el sitio de recolección de la muestra.
- No usar después de la fecha de caducidad.
- Diseñado para el uso personal o por un proveedor de atención sanitaria.
- Usar mientras se está sentado, ya que con cualquier procedimiento de extracción de sangre puede producirse un desmayo.
- No debe usarse en los talones de lactantes.
- Los usuarios deben validar el uso del producto para su prueba diagnóstica específica.
- Solo para uso externo.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante, al representante autorizado y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario o paciente.

SÍMBOLOS

- | | | | |
|-------------|---|-----------|---|
| REF | Número de catálogo | i | Consulte las instrucciones de uso |
| LOT | Número de lote | ⚠ | Este dispositivo contiene objetos punzantes |
| ⏳ | Fecha de caducidad | ⚡ | No usar si el paquete está dañado |
| ⚡ | Para un solo uso | Rx ONLY | Uso con prescripción exclusivamente |
| 18°C - 28°C | Conservar a 18-28 °C | STERILE R | Esterilizado mediante irradiación |
| 25% - 85% | Transportar a una humedad relativa de 25-85 % | ⚡ | No volver a esterilizar |
| CE 2797 | Marcado CE | MD | Dispositivo médico |
| 🌐 | Importador | | |