

FÖRPACKNINGSLAGA ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER



1. Tvätta händerna före användning. Vårdpersonal måste bära handskar under insamlingen.



2. Ta ut knappen ur påsen.



3. Vrid av locket från det kompatibla röret.



4. Håll fyllningslinjerna vända utåt och tryck ned röret i enheten tills det sitter tätt.




5. Dra bort fliken från den röda knappen.



6. Ta bort det genomskinliga plastskyddet från den röda knappen.



7. Förbered axeln. Sätt fast enheten på den rengjorda axeln och tryck på knappen för att starta insamlingen.

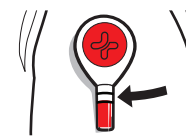

8. Vänta i 5 minuter på att röret fylls. Ta bort enheten om blodet när den översta fyllningslinjen innan tiden är slut.



9. Ta bort enheten genom att dra bort den från ena sidan.



10. Ta bort röret från knappen med en lätt vridning och dra det nedåt.



11. Snäpp fast locket helt på röret. Blanda enligt tillverkarens märkning.

**Kontakta oss
för hjälp:
1-800-257-2370**

ÖVERSATTA INSTRUKTIONER

- The TassoOne Plus instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von TassoOne Plus finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de TassoOne Plus y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di TassoOne Plus sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du TassoOne Plus et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de TassoOne Plus en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:

- Instruktionerna för användning och översättningar tillhörande TassoOne Plus finns på Tassos webbplats:
- A TassoOne Plus használati utasítás és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použití a preklady TassoOne Plus najdete na webové stránke spoločnosti Tasso:
- TassoOne Plus-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- TassoOne Plus-bruksanvisningen og -oversættelser finnes på Tasso-nettstedet:
- TassoOne Plus -käyttöohjeet ja käänökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoone-plus-ifu>

AVSETT ÄNDAMÅL

Möjliggör självinsamling av ett kapillärblodprov i kombination med en kompatibel provtagningsbehållare.

MEDFÖLJANDE MATERIAL

Varje låda innehåller en TassoOne Plus-enhet.

KASSERING

Följ lokala riktlinjer för kassering av förbrukade eller defekta spetsar som biologiskt riskmaterial.

NÖDVÄNDIGT MATERIAL (medföljer ej)

- Kompatibelt rör, se tillverkarens märkning
- Handskar (för vårdpersonal)

- Alkoholtork
- Bandage
- Värmepaket eller annan metod för uppvärmning av armen
















VARNINGAR

- Endast för receptbelagd användning.
- Får bara användas en gång.
- Sterilisera inte om enheten.
- Använd inte om påsen har öppnats eller skadats.
- Håll utom räckhåll för barn.
- Mindre blåmärken eller kvarvarande märken kan uppstå runt provtagningsstället.
- Använd inte efter utgångsdatum.

- Avsedd för egen användning eller användning av vårdpersonal.
- Använd i sittande ställning då svimning kan inträffa vid blodprovtagning.
- Får inte användas på spädbarns hälar.
- Användare måste bekräfta användningen av produkten för avsedd diagnostisk provtagning.
- Endast för utvärtes bruk.

Alla allvarliga tillbud som inträffar i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren, den auktoriserade representanten och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten bor.

SYMBOLER

	Katalognummer		Följ användningsinstruktionerna
	Partinummer		Den här enheten innehåller vassa nålar
	Sista användningsdatum		Använd inte om förpackningen är skadad
	Får bara användas en gång		Endast för receptbelagd användning
	Förvaring vid 18–28 °C		Steriliserad med bestrålning
	Transport vid 25–85 % RH		Sterilisera inte om enheten
	CE-märke		Medicinsk enhet
	Importör		